

TÄÄLLÄ INSPIRAATIO
ON LUONNONVOIMA

IR

IN

P


S

KUOPIO

AA

TI

O

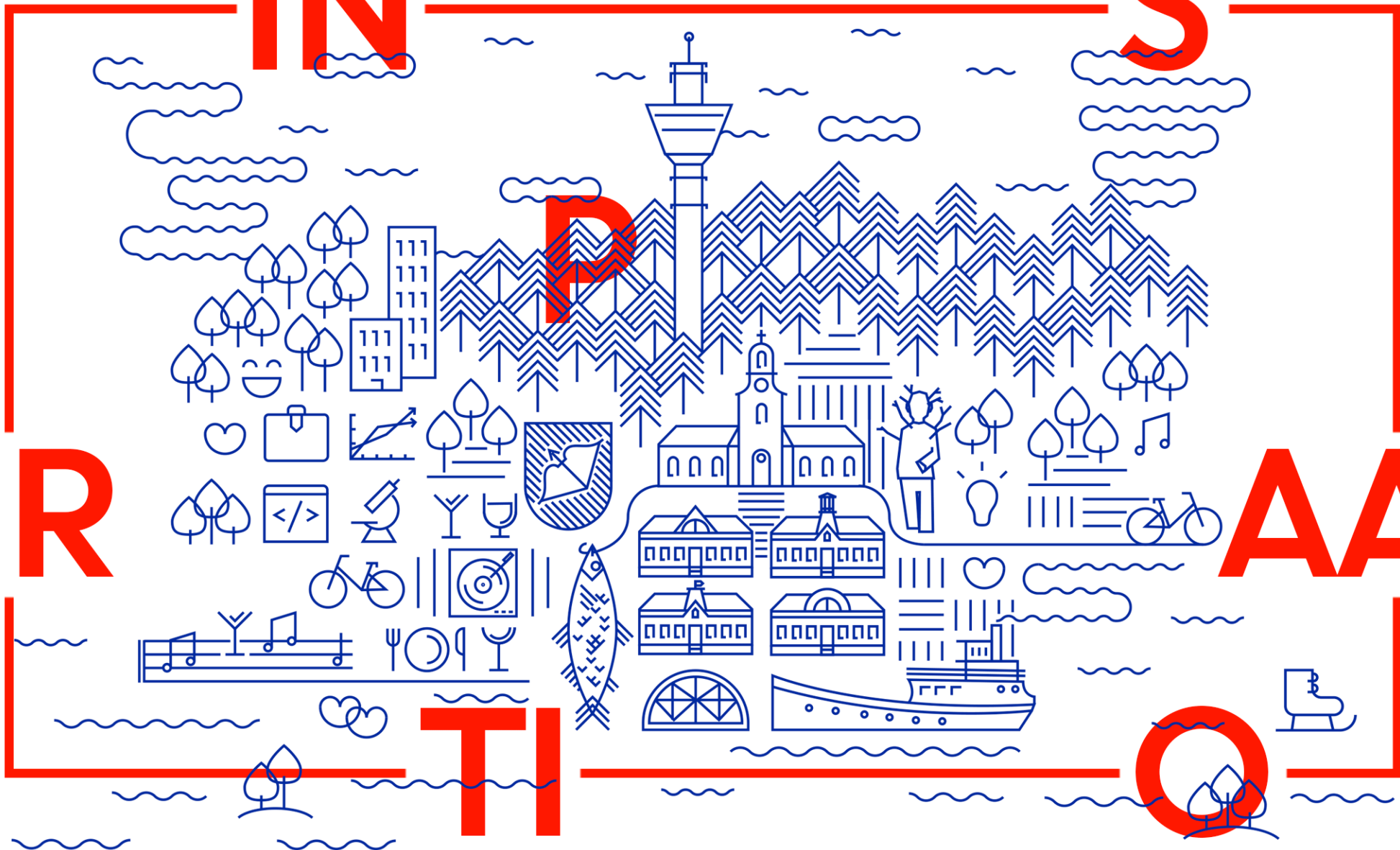

Kotihoidon turvapalvelujen laitevalikoima ja muut teknologiaratkaisut 2019

Turvapuhelin



- Turvapuhelin asennetaan kodissa keskeiselle paikalle, siinä on herkkä kaiutin ja mikrofoni, jonka avulla ääni kuuluu sisätiloissa myös toisiin huoneisiin.
- Turvapuhelin muodostaa kaksisuuntaisen puheyhteyden turvahälytyskeskukseen, kun laitteella tehdään hälytys tai lisälaitte rekisteröi hälytyksen.
- Turvapuhelimeen yhdistetään tarvittaessa erillisiä lisälaitteita (mm. turvahälytys nappi, ovihälytin, palohälytin).
- Turvapuhelin toimii verkkovirralla ja sen sisällä on toimiva SIM-kortti yhteyksiä varten.

Hälytysnappi



- Hälytysnappia painamalla saa nopeasti yhteyden kotihoidon turvahälytyskeskukseen.
- Soveltuu asiakkaalle, joka kykenee suorittamaan turvahälytyksen painamalla hälytysnappia (n. 1 sekunnin ajan)
- Hälytysnappi toimii parhaiten kodin sisätiloissa, hälytysnapin toimintaa ulkotiloissa ei voida taata.
- Hälytysnappia voi pitää joko rannekkeena tai kaulanauhassa ja se on suihkunkestävä (ei kestä saunaa).

Ovihälytín

- Ovihälytín voidaan liittää turvapuhelimeen lisälaitteeksi.
- Ovihälytín valvoo ulko-ovia: Se hälyttää ohjelmoinnin mukaisesti aina kun ovi avataan ja asiakas poistuu asunnosta. Se voidaan asettaa myös hälyttämään vain ilta- ja yö-aikaan.
- Ovihälytín soveltuu asiakkaille, joilla on riski lähteä ulos ja eksyä.
- Ovihälytín lähettää hälytyksen turvahälytyskeskukseen, kun asiakas poistuu kotoa, esim. yöllä. Turvahälytyskeskus lähettää hoitajan tarkistamaan ja etsimään asiakasta.
- Ovihälyttimessä on älykkäitä ominaisuuksia, se tunnistaa milloin asunnosta poistutaan ja milloin mennään sisälle. Ovihälytín voidaan ohjelmoida myös hälyttämään, mikäli asiakas ei ole palannut asuntoon määritellyn ajan kuluessa. Älykkäillä ominaisuuksilla vähennetään vahinko- ja virrehälytysten määrää.



Palohälytin



- Turvapuhelimeen on mahdollista liittää palovaroitin.
- Laite soveltuu asiakkaille, jotka eivät osaa reagoida tai hälyttää apua palovaroittimen hälyttäessä.
- Palohälytyksen tullessa hälytystieto ohjautuu kotihoidon turvahälytyskeskukseen, josta hälytys ohjataan edelleen hätäkeskukseen.
- Palohälytyksen tullessa varoitin piippaa kovaäänisesti myös kotona, kuten normaali palohälytin.

Vuodeanturi



- Vuodeanturi on tarkoitettu asiakkaille, joilla on mm. riski kaatua vuoteesta noustessa tai asiakas ei palaa vuoteeseen tietyn ajan kuluessa. Vuodeanturi seuraa vuoteessa oloa, siitä poistumista ja palaamista.
- Vuodeanturin tarkoitus on tuoda turvaa myös yöllä. Vuodeanturi voidaan asettaa seuraamaan em. asioita, joiden perusteella ja muutostilanteissa turvahälytyskeskus voi asetettujen arvojen mukaan lähettää asiakkaan luo turva-auttajan tarkistamaan asiakkaan vointia.
 - Asiakas nousee ylös yöllä ja kaatuu, vuodeanturi havainnoi, että asiakas ei ole palannut vuoteeseen 30 minuutin kuluessa ja lähettää turvahälytyksen. Turvahälytyskeskus ottaa asiakkaaseen puheyhteyden tarkastaakseen asiakkaan voinnin ja tarvittaessa ohjaa hoitajan asiakkaan luo

Sähköinen ovenavaus

- Kaikille turvapalvelun asiakkaille asennetaan kodin ulko-oveen sähkölukko.
- Sähkölukko mahdollistaa hoitajan pääsyn asiakkaan luo turvallisesti ja nopeasti.
- Hoitaja avaa oven käyttämällä työpuhelintaan, älykännykkää. Älykännykässä oleva sovellus avaa ulko-oven ilman avainta.
- Sähkölukko ei estä normaalin avaimen käyttöä ja asiakas itse käyttää oven avaamiseen edelleen avainta.
- Sähkölukko on asiakkaalle maksuton.

Virtuaalikoitihoito

- Kotihoidon käyntejä voidaan tehdä myös videoyhteydellä.
- Soveltuu asiakkaille, jotka tarvitsevat hieman muistutusta ja ohjausta päivän askareiden ja omahoidon toteuttamiseen.
- Videoyhteyden aikana asiakas voi videoyhteydessä keskustella kotihoidon hoitajan kanssa.
- Asiakkaan kotiin asennetaan helppokäyttöinen tablettitietokone, johon kotihoito ottaa videoyhteyden erikseen sovittuina aikoina.
- Virtuaalinen kotihoito käynnistyy palveluntarpeenarvioinnin perusteella. Lisätietoa saa vanhusten palveluohjauksesta.